

Lustromedic やわらかな肌触り サージカルマスク Surgical Mask



(袋なし)



(個包装)

Lustromedic
やわらかな肌触りサージカルマスク
MM1001

- 入数 :50 枚入 ●サイズ :175 x 90 mm
- 原材料: 本体 (外側)・フィルター: ポリプロピレン
本体 (内側): ナイロン、耳ひも: ポリウレタン
ノーズフィット: ポリエチレン
JAN コード (W) 4901126200182

Lustromedic
やわらかな肌触りサージカルマスク 個包装
MM2001

- 入数 :50 枚入 ●サイズ :175 x 90 mm
- 原材料: 本体 (外側)・フィルター: ポリプロピレン
本体 (内側): ナイロン、耳ひも: ポリウレタン
ノーズフィット: ポリエチレン、包装材: ポリプロピレン
JAN コード (W) 4901126200199

Lustromedic やわらかな肌触り サージカルマスクは日本製の高品質で清潔安全なマスクです。素材にもこだわり、口元側には肌触りの良いナイロン製の不織布を使用し、肌への不快感が少なく、心地良い装着感があります。耳ひもには長時間使用しても痛くなりやすいスパンデックス製の高伸度の耳ひもを採用しています。使用しているフィルターも花粉・ウイルス飛沫を99%カットする高性能フィルターなので、安心してお使い頂けます。

不織布三層構造マスク

BFE

バクテリア飛沫捕集効率試験 99% カット

VFE

ウイルス飛沫捕集効率試験 99% カット

PFE

微粒子飛沫捕集効率試験 99% カット

安心安全の
日本製


50枚入
(袋なし / 個包装)

花粉・ウイルス飛沫等 99%カットフィルター * 採用
試験機関: (一財)カケンテストセンター
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。



三重県の自社工場で生産の日本製マスク

三重県松阪市にある自社工場内で製造された高品質の日本製のマスクです。徹底された品質管理の元、製造されていますので安心してお使い頂けます。

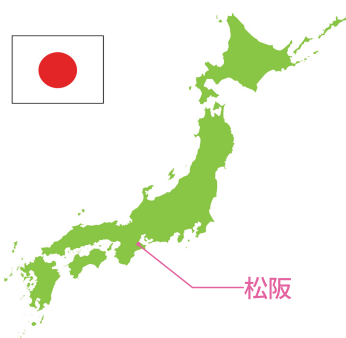

松阪

ソフトで柔らかな肌触りで不快感を大幅軽減

三層構造の口元側にナイロン製不織布を使用し、柔らかな肌触りを提供します。一般的な不織布と比べ、肌への不快感やトラブルも減少し快適な装着感があります。



痛くなりにくい高伸度で戻りの少ない耳ひも

プレミアムストレッチファイバーを使用し、ソフトな伸びで着脱が楽です。伸長時と回復時のパワーの減少が非常に小さいので、耳への負担が大幅に軽減されます。長時間の使用でもストレスが少なくご使用頂けます。



顔にしっかりフィットしてズレにくい構造

形状が戻りにくいノーズフィットと顔との隙間ができにくいサイドのカーブ加工形状により、顔にしっかりフィットします。Ωプリーツ織りの形状との相乗効果で、口元の空間をキープしつつ長時間装着した後もフィット感は持続します。



商品名：やわらかな肌触りサージカルマスク（袋なし/個装）

●原材料：本体(外側)・フィルター：ポリプロピレン、本体(内側)：ナイロン、耳ひも：ポリウレタン、ノーズフィット：ポリエチレン

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税別)	JAN CODE
MM1001(W)	(W) ホワイト	(袋なし) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200182
MM2001(W)	(W) ホワイト	(個装) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200199

※ケース単位(メーカー出荷単位):40箱

※メーカー希望小売価格(定価)は、弊社営業担当までご確認ください。

岩崎工業株式会社

IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

以下の取得認定工場

- ・ISO 9001
- ・医療機器製造業登録番号 24BZ200037
- ・第二種医療機器製造販売業許可番号 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN

取扱店